

保証書

本書はご購入の日から下記期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。
ご記入いただく個人情報の利用は下記に記載しております。

〈保証規定〉

- 1.取扱説明書等の注意事項や禁忌事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、本体およびアタッチメント(クシ部分を除く)はご購入日より1年間、クシ部分および専用充電ACアダプター・専用充電ケーブルは半年間無料修理いたします。
- 2.保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - (1)使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損害
 - (2)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障および損害
 - (3)火災・地震・水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害・異常電圧による故障および損害
 - (4)車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損害
 - (5)電池や消耗または摩耗した部品交換の場合
 - (6)中古品・個人売買・ネットオークションおよびインターネット上の転売店等で購入された場合
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本書は再発行いたしませんので、ご購入年月日記載の明細書とともに大切に保管してください。

※記入いただいたお客様の個人情報(保証書控)は、保証期間内に無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

商品名	デンキバリブラシ®2.0+ボディ		
保証期間	本体(クシ部分除く)	ご購入日から	1年間
	クシ部分・専用充電ACアダプター・専用充電ケーブル	ご購入日から	半年間
製品番号	S/N	ご購入日	年 月 日
お客様	ご住所 〒		
	お名前 電話番号 () -		
販売店	住所/販売店名		
	電話番号 () -		



発売元：有限会社 GMコーポレーション
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル2F



エレクトロン カスタマーサポートセンター
通話料無料 0120-66-7170
受付時間:月-金 11:00-18:00(祝祭日を除く)



デンキバリブラシ アフターサポート
<https://gm-beauty.jp/contact/>
※QRコードを読むと入力フォームが起動します。



保管用

保証書付 ver.1

el

ELECTRON
LAB

DENKI BARI
BRUSH™ 2.0
+BODY

デンキバリブラシ®2.0+ボディ



取扱説明書

安全上のご注意 P1-3

同梱物 P3-4

操作方法 P5

使い方 P6-9

使用後の保管とお手入れ方法 P10

保証書 P11

このたびはデンキバリブラシ 2.0 +ボディをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(P.1-3)を必ずお読みください。
- ・保証書は裏表紙に付属しています。
- ・この取扱説明書は、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・注意事項は下記のように区分し、内容を定義しております。安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ずお守りください。

【表示の説明】

	危険	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	取り扱いを誤った場合、人が障害を負う可能性または、物的損害が発生する可能性が想定される内容です。
	禁止	この記号は「禁止」(しないでください)を示します。
	強制	この記号は「強制」(必ずしてください)を示します。

危険 (ご使用に関して)		
	禁止	・次のような医用電子機器との併用はしないでください。 ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器や人工心肺など生命維持用医用電子機器や心電計など装着型医用電子機器

警告 (ご使用に関して)		
	禁止	・本製品およびACアダプターを浴室/サウナなどで使用しないでください。感電・発火・ショートの際の恐れがあります。 ・次のような方は使用しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。不明な点は医師に相談の上その指示に従ってください。 急性疾患・内臓疾患・発熱している方・血圧異常・伝染病疾患・結核症疾患・悪性腫瘍・血液疾患・皮膚病・アトピー性皮膚炎・アレルギー体質・特に肌や皮膚が敏感な方・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害による毛細血管拡張を起こしている方・疲労の激しい方・体調がすぐれない方・飲酒や薬を服用中の方・日焼けによる炎症を起こしている方・医師が禁止した場合・妊娠中、生理中の方

警告 (ご使用に関して)	
	禁止 ・下記部位には使用しないでください。事故や肌/身体へのトラブルの恐れがあります。 整形手術をした部位・眼球/まぶた/耳/口の中などの粘膜・湿疹・のどぼとけ・かぶれ・にきびなど炎症を起こしている部位・金属/プラスチック/シリコンなどを埋め込んでいる部位・かゆみ/物的刺激などによる炎症・シミ(色素沈着)などのある部位 ・本製品の青・赤の光線を直接見ないでください。事故やトラブルの恐れがあります。 ・使用中または充電中に異常発熱する場合は直ちに使用を中止してください。故障や発火の原因となります。 ・用途以外の目的で使用しないでください。

警告 (本体に関して)	
	禁止 ・本製品を火中投下・加熱・高温で充電・保管しないでください。発熱・発火・破裂の原因となります。 ・分解、改造などを行わないでください。火災・感電・ケガの原因となります。 ・子どもの手の届く場所に保管しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。 ・本製品を落としたりぶつけたりしないでください。本体が故障、または事故やトラブルの恐れがあります。 ・100-240V以外では使用しないでください。火災・感電、故障の原因となります。 ・ACアダプターおよび充電ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災・感電、故障の原因となります。 ・ACアダプターや充電ケーブルが破損しているときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。 ・濡れた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

警告 (ご使用に関して)	
	強制 (必ず守る) ・痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止してください。 ・肌や頭皮に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。異常を感じられた場合や合わない場合は使用を中止してください。トラブルの原因となります。 ・使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして様子を見ながら使用してください。 ・使用時間や使用頻度は必ず取扱説明書の指示を守ってください。

警告 (本体に関して)	
	強制 (必ず守る) ・ご使用後のお手入れの際は必ず電源をOFFにし、ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災やケガの原因となります。 ・ご使用の際異常が発生したら、電源をOFFにし、コンセントからACアダプターを抜き、直ちに使用を中止してください。その後、【エレクトロニクスカスタマーサポートセンター】まで修理・点検を依頼してください。

⚠ 注意 (ご使用に関して)	
 禁止	・オイルや油分があるものは使用しないでください。クシの劣化を著しく早める等の原因となります。 ・クシ部分を引っ張る、強い圧をかけるなどの使い方をしないでください。クシが折れるなど製品が損傷する場合があります。

⚠ 注意 (本体に関して)	
 禁止	・湿気・ホコリの多い場所で保管しないでください。故障の原因となります。 ・お手入れの際はベンジン/アセトン/シンナーなどで製品を拭かないでください。故障の原因や製品表面を変化させる可能性があります。

⚠ 注意 (本体に関して)	
 強制 (必ず守る)	・充電する際は本体電源をOFFにした状態で行ってください。故障の原因となります。 ・本製品に使用する付属品は必ず当社指定製品をご使用ください。故障の原因となります。 ・ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプターの側面を持って抜いてください。感電・ショート・発火の原因となります。

同梱物

- ・本体
- ・フェイス アタッチメント
- ・ボディ アタッチメント
- ・デンキバリブラシ ローション
- ・専用充電ACアダプター
- ・専用充電ケーブル (USB Type-A to Type-C)
- ・取扱説明書(保証書付き)



LOTION FOR DENKI BARI BRUSH

デンキバリブラシローション(頭・顔・全身用化粧水)

デンキバリブラシ® 専用ローション。

頭皮、お顔周りを含む全身にご使用いただけます。


内容量: 200ml

全成分: 水・フラーレン・ローズマリー葉エキス・ドクダミエキス・ヨモギ葉エキス・ビワ葉エキス・レパゲルマニウム・ミネラル塩・BG・PVP



●各部名称


フェイス アタッチメント

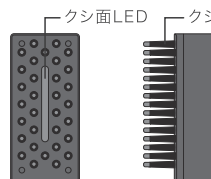

デコルテより上の箇所専用です。
頭皮・顔・デコルテ周りにご使用ください。

※お買い上げ時は、本体にセットされています。

ボディ アタッチメント

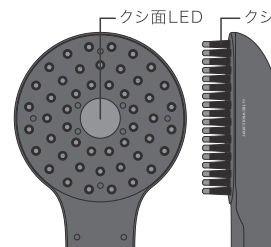

身体専用です。
脚全体やおなか周りなどにご使用ください。

※アタッチメントの固定には、簡単に着脱可能なマグネット式を採用しています。

本体



●本体ボタン・インジケーター名称



- ①メインボタン
- ②LEDリング(インジケーター)
レベル/モード・状態表示LED
- ③モード切替ボタン

操作方法

※ボタン・インジケーター名称は前項参照

●基本操作方法

- ・①メインボタンを長押しすると、起動通知音が鳴るとともに②LEDリングがホワイで点滅を開始し、同時にクシ面中央のLED(レッド/ブルー)が点滅を開始し作動します。その後、レベル1を示す通知音(ピ)が鳴ります。
- ・安全のため、アタッチメントが装着されていない状態では電源ONすることはできません。
- ・①メインボタンを押すごとに刺激レベルが5段階で切り替わります。
- ・本体電源ONの状態、③モード切替ボタンを押すとモードが切り替わります。
- ・連続動作5分で通知音3回(ピピピ)が鳴り、10分を経過すると通知音5回(ピピピピピ)とともに自動停止します。
- ・作動中に電源をOFFにする場合は、①メインボタンを長押ししてください。
- ・本製品はバッテリーで動作しています。バッテリー残量が少なくなると②LEDリングがレッドで点滅し、通知音(ピッポッ)が継続して鳴ります。速やかに充電してください。
- ・充電中は②LEDリングがホワイで明滅します。充電完了後は、ホワイの点灯状態に切り替わり、一定時間経過後に消灯します。

●モードの切り替え

- ・③モード切替ボタンを押してモードを切り替えます。モードに応じて②LEDリングの色と点滅パターンが変化します。
- ・モードの種類は装着しているアタッチメントによって異なります。
- ・アタッチメントを交換すると、ボディ、フェイスのどちらが装着されているかを本体が自動認識します。

【フェイス アタッチメント】

- ・3種類のモードがあります。
- ・①ノーマルモード(ホワイ):低周波刺激が連続して出力されます。
- ・②ハリモード(パープル):低周波刺激がトントんと断続的に出力されます。
- ・③波モード(ブルー):低周波刺激が波打つように出力されます。

【ボディ アタッチメント】


- ・2種類のモードがあります。
- ・①ノーマルモード(ホワイ):低周波刺激が連続して出力されます。
- ・②ハリモード(パープル):低周波刺激がトントんと断続的に出力されます。

●レベルの調整

- ・5段階のレベルがあり、電源をONにするとレベル1から始まります。
- ・①メインボタンを押すごとにレベルが1→2→3→4→5→1と切り替わります。
- ・レベルが上がるごとに②LEDリングの点滅が速くなります。
- ・まずはレベル1からご使用ください。
- ※モードを切り替えるとレベルは1に戻ります。

●アタッチメントの交換方法

- ・アタッチメントの交換は本体電源をOFFにした状態で行ってください。
- ・アタッチメントを取り外す際は、本体をしっかりとし握りアタッチメントを上方向に引き抜いてください。
- ・アタッチメントを取り付ける際は、手や指などを挟み込まないようご注意のうえ、向きをよく確認し本体へまっすぐ奥までめ込んでください。

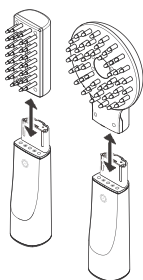

使い方

フェイス アタッチメント使用時


頭皮

- ・1回10～20分程度、1日に最大20分×2回までを目安にご使用ください。
- ・乾いた清潔な頭皮にご使用ください。
- ・刺激の感じ方には個人差があります。心地よいと感じるレベルでご使用ください。
- ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシローションをご使用ください。

※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。

おすすめモード: ノーマル(ホワイ)・波(ブルー)

- ① デンキバリブラシローションを頭皮全体にスプレーしてなじませます。

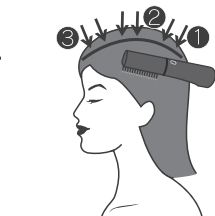


- ③ 前頭部にあてていきます。

- ④ 側頭部にあてていきます。




- ⑤ 後頭部にあてていきます。

- ⑥ 襟足から首～鎖骨にかけて流すように動かします。

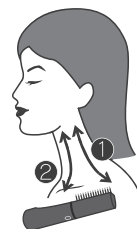

※首周りの皮膚は、頭皮に比べ刺激を感じやすいため、デンキバリブラシローションをスプレーしたあと、手でなじませてからご使用ください。

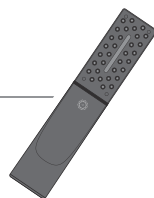

使い方

フェイス アタッチメント使用時


顔周り

- ・1回5分程度、1日に最大5分×2回までを目安にご使用ください。
- ・清潔なお肌にご使用ください。
- ・必ずデンキバリブラシローションで潤いを与えてご使用ください。
- ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシローションをご使用ください。

※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。

おすすめモード：ノーマル(ホワイト)・ハリ(パープル)

- ① デンキバリブラシローションを襟足・首・鎖骨とフェイスラインに沿って顔全体にスプレーしてなじませます。

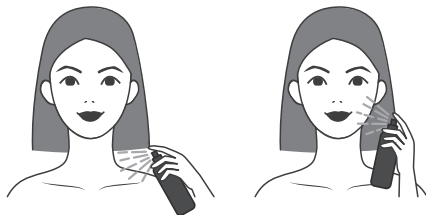

- ② 襟足から首～鎖骨にかけて ③ あごの下からフェイスラインの裏側を流すように動かします。



- ④ 顔全体を下から上に向かって ⑤ 集中的にケアしたい部分は動きを止めてご使用ください。



- ⑥ 最後に②をもう一度繰り返します。

※まぶたの上や'のどぼとけ'には使用しないでください。


使い方

ボディ アタッチメント使用時


脚

- ・1部位10～20分程度を目安にご使用ください。
 - ・必ずデンキバリブラシローションで潤いを与えてご使用ください。
 - ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシローションをご使用ください。
- ※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。

- ① デンキバリブラシローションを ② 指の付け根から足首に向かって脚全体にスプレーしてなじませます。流すように動かします。

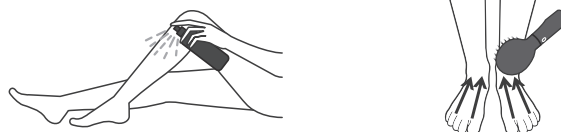

- ③ 足首から膝に向かってふくらはぎ全体を流すように動かします。 ④ 膝裏・膝周りから足の付け根に向かって太もも全体を流すように動かします。

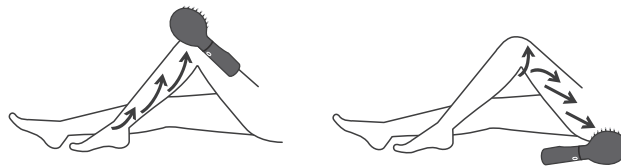

すべての肌に、驚きを。
SURPRISE & HAPPINESS FOR EVERYONE.


使い方

ボディ アタッチメント使用時

おなか

- ・1部位10～20分程度を目安にご使用ください。
- ・必ずデンキバリブラシーションで潤いを与えてご使用ください。
- ・使用中、刺激を強く感じる場合は、都度デンキバリブラシーションをご使用ください。


※使用中は製品から作動音が鳴りますが、故障ではありません。

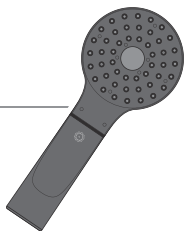


- ① デンキバリブラシーションをおなかから腰周りにかけて全体にスプレーなじませます。




- ② おへそ周りを時計回りに流すように動かします。

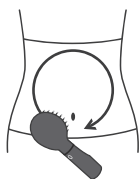

- ③ 腰周りやわき腹などを上下に動かします。

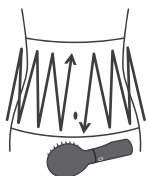

- ④ 骨盤に沿って足の付け根に向かって流すように動かします。

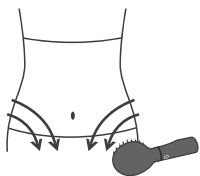

他にも背中・二の腕・ヒップなど全身にご使用いただけます。
※詳しくは公式使い方ムービーをご確認ください。



公式YouTubeチャンネル
で使い方ムービー 公開中



使用後の保管とお手入れ方法

- ① 使用後は必ず本体電源をOFFにしてください。

- ② 保管場所

- ・高温多湿を避け、湿気の低いところで保管してください。
- ・気圧、日光、ホコリ等を含んだ空気によって機器に悪影響を及ぼす可能性のある場所には保管しないでください。
- ・傾斜、振動、衝撃などの安全状態に注意してください。
- ・化学薬品、それらの保管場所やガス発生場所に保管しないでください。
- ・本製品およびACアダプターは清潔にしてください。
- ・長期間使用しない場合は、満充電にした状態での保管を推奨します。

- ③ 使用後のお手入れ方法

- ・機器の表面は乾いた布で軽くふき、水気や液体が内部に入らないようにしてください。ステアライザー（紫外線消毒器）などでの殺菌はできません。
- ・使用後は毎回、消毒用エタノールを含ませた布でシリコン製のクシを1本ずつ根元から先端にかけて優しくふき、油分やヘアケア剤をふき取ってから保管してください。シリコン成分やオイル成分が付着することで、クシの劣化につながります。

※シリコン製のクシは消耗品です。クシの交換をご希望の場合はエレクトロン カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。



仕様

定 格	AC100-240V 50/60Hz DC5V 2.4A
バッテリー仕様	リチウムイオンバッテリー(3.6V 960mAh 3.456Wh)
外 形 寸 法 (クシ部分含む)	約W42×H200×D42mm(フェイス アタッチメント取付時) 約W100×H241×D42mm(ボディ アタッチメント取付時)
質 量	フェイス アタッチメント取付時: 約197g ボディ アタッチメント取付時: 約278g
材 質	本体: ABS樹脂 クシ: シリコン(先端部: ステンレス)
製 造 国	日本

- ・連続使用時間の目安は約300分、充電時間の目安は約150分です。(バッテリー状態によって異なります)
- ・廃棄する際は各自自治体の廃棄方法に従ってください。

よくあるご質問・トラブルシューティング

- ・お困りの際やご使用中に異常を感じた際は、公式オンラインショップに掲載の‘よくあるご質問・トラブルシューティング’をご確認ください。確認いただいても症状が改善されない場合は、次ページ記載のエレクトロンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ・メンテナンスをご希望の場合は次ページ記載のQRコードより、デンキバリブラシアフターサポートをお申し込みください。

ELECTRON
ONLINE SHOP

