

# MYTREX EMS HEAD SPA PRO

一般家庭用美容器

取扱説明書

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

# 安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しお買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

## ⚠ 危険



禁止

- 次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。  
医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。
  - ◎ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
  - ◎人工心肺など生命維持用医用電子機器
  - ◎心電計などの装着型医用電子機器
- 差込口や充電端子にピンやごみを付着させない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。

## 警告



禁止

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。  
事故や肌・身体トラブルの原因になります。
  - ◎整形手術をした部位 ◎美容医療施術直後(施術後2週間程度)
  - ◎皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合およびその部位
  - ◎にきび・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位
  - ◎かゆみやほてりのある部位 ◎膨らんだほくろ・ウイルス性のイボ
  - ◎のどぼとけ ◎鼻・耳・唇 ◎眼球・まぶた・目のまわり ◎口内や陰部・粘膜など
  - ◎心臓・みぞおちの周辺部位 ◎生理中の腹部 ◎刺青(タトゥー)周辺
  - ◎当日、脱毛処理をした部位 ◎金属、シリコン等を埋め込んである部位
- 使用中は金属や他の電気製品に接触させない。  
けがや本体が故障する原因になります。
- 動作中にアタッチメントの間に指を入れない。  
けがをする原因になります。

 警告

禁止

- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーなどで本体や付属品を乾燥しない。部品の変形・故障の原因になります。
- 次に該当する方は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師に相談してください。
  - アトピー性皮膚炎・脂漏性皮膚炎・湿疹など皮膚疾患がある方
  - アレルギー体質で特に肌が敏感な方
  - 妊娠中・授乳中・生理中の方
  - シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
  - 急性疾患・伝染病疾患のある方
  - 悪性腫瘍のある方
  - 感染症疾患の方
  - 結核性疾患のある方
  - 内臓疾患のある方
  - 骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方
  - 神経障害・皮膚知覚障害のある方
  - 自ら操作が行えない方、安静を必要とする方、四肢の不自由な方
  - 意思表示のできない方、麻痺および知覚障害の方

## 警告



禁止

- 次に該当する方は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師に相談してください。
  - ◎洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方
  - ◎出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ◎高血圧の方
  - ◎心臓疾患のある方、血栓のある方 ◎体調のすぐれない方
  - ◎骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方
  - ◎目や顔に疾患がある方・治療歴のある方 ◎飲酒後や疲労の激しい場合
  - ◎薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方
  - ◎医師からマッサージを禁じられている方 ◎医師の治療を受けている方
  - ◎眠気をさそう薬を服用中の方 ◎発熱（38℃以上）している方
  - ◎乳幼児や成長過程の子供には使用しない。使用させない。  
ペットには使用しない。

## 警告



使用者制限

- 子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。  
未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。  
また、子供の手の届かない場所に保管する。  
事故やけがををする原因になります。



用途以外禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
けがや本体が故障する原因になります。



無理な扱い禁止

- ACアダプターおよびUSBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

## 警告



傷んだコードプラグ  
使用禁止

- ACアダプター、USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。



落下禁止

- 不安定な場所に置かない。  
また、本体や付属品を落としたり、ぶつかけたりしない。  
けがや本体が故障する原因になります。



浴室充電禁止

- 浴室内での充電は絶対にしない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。

## 警告



異臭異常発熱時  
使用禁止

- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。  
破損・発火の原因になります。



発火注意

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。  
また、火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。  
また、熱器具に近づけない。本製品は充電式電池を内蔵しています。  
発熱・発火・破裂・動作不良の原因になります。



分解禁止

- 分解や修理・改造はしない。  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理は弊社カスタマーサポートにご相談ください。



## 警告



アダプター  
を抜く

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。  
けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



必ず守る

- 本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し、医師に相談する。
- 本製品には必ず付属の充電台、ACアダプター、およびUSBコードを使用する。  
付属品は他の製品には使用しない。

## 警告



必ず守る

- 歯の治療を受けている人は、使用を控えるか部位をずらして使用する。  
歯の治療中は、頬やあごに刺激を強く感じたり不快に感じる場合があります。  
効果に影響はありませんが、強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。
- 交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状の電圧を確認のうえ使用する。ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。  
火災・感電・故障の原因になります。
- 本体を使用しないとき・掃除するときは必ず電源をオフにする。充電台を掃除するときは必ずACアダプターをコンセントから外す。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。また、ぬれた手で抜き差しはしない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。

## ⚠ 注意



禁止

- オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しない。  
肌トラブルや故障の原因になります。
- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。  
本体が故障する原因になります。
- 本体および付属品をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
- 次に該当する人は使用しない。  
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因になります。
  - 植毛をされている人。
  - 部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人。
- 赤色LED光を直接のぞき込まない。  
目を傷める原因になります。
- EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。  
レベルは少しずつ調整してください。

## ⚠ 注意



禁止

- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。サウナなど高温多湿になる場所では、使用しない。においや変色・故障の原因になります。



必ず守る

- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。また、肌が十分に湿った状態になるように随時水などを補充する。そのまま使用すると、頭皮や肌を傷める原因になります。
- アタッチメントを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。過度に1ヶ所に集中して使用しない。髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてから、からんだ髪の毛を外す。
- 1部位1回5分～15分程度、1日合計30分以内を目安に使用する。過度な使用を避け、少しずつ位置をずらしながらケアしてください。
- 使用するときには、必ずすべてのアタッチメントを取り付ける。

## ⚠ 注意



必ず守る

- シャンプーや頭皮用トリートメント剤、化粧水やジェルなどを使った場合は、必ず本体を水洗いする。  
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因になります。
- 初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。使いはじめや慣れるまでは、必ずEMSレベル1、低速モードから使用する。  
事故やけがをする原因になります。身体に慣らしてからレベルを調整してください。
- 顔に使用するときはフェイス用アタッチメントを使用する。  
肌を傷める原因になります。
- アクセサリー類(ネックレス・イヤリング等)は外してから使用する。  
事故やけがの原因になります。

## ⚠ 注意



必ず守る

- 顔に使用するときには、必ずメイクを落として使用する。  
メイクが崩れたり、肌トラブルの原因になります。
- 使用後は必ず本体の汚れ・水分をしっかりと拭き取る。  
また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。  
本体がぬれたままの状態に放置すると、充電端子が腐食する原因になります。
- 軽くあて、絶対に強くあてない。  
けがや本体が故障する原因になります。

# 各部の名称とはたらき

## 本体

電源ボタン  
(電源オン/オフ、  
回転速度選択)

EMSレベル  
ボタン



青色LED  
ランプ

## EMSレベル表示(動作中)



## 電池残量表示(電源オン時\* / 充電中)



\* 充電残量は、本体の電源をオンにした際に約2秒間点灯するLEDの数で確認することができます。


## 本体(裏)

### 可動部

※無理な力をかけたり、引っ張らないでください。

### 充電端子

### 赤色LED (フォト)

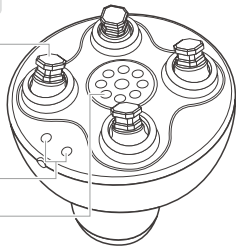

## アタッチメント(消耗品)

### 頭皮・ボディ用

※お買い上げ時は、本体にセットされています。



### ニードル形 (頭皮専用)



### フェイス用



## 注意


※万一、セット内容に不足がございましたらカスタマーサポートまでご連絡下さい。

※本体は防水仕様になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。なお、水中では本体の動作が停止し、使用することができませんのでご注意ください。




## 付属品

充電端子

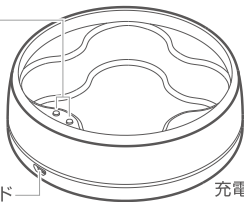

USBコード  
差込口


充電台

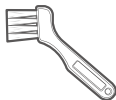

掃除用  
ブラシ



USB  
コード

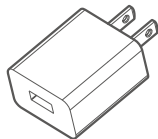

AC  
アダプター

## 注意

※充電台、USBコード、ACアダプターは防水ではありません。水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での使用や、浴室内での充電は絶対にしないでください。

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

# ご使用前に(充電方法)

初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

## お願い

必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

### ●電池残量低下時

30秒に1度、青色LED1~5が素早く3回点滅すると同時に「ピピピ」となります。



### ●充電・動作時間の目安\*


充電時間	動作時間
約4時間	最長 約5時間

- \*動作時間は低速モードで使用した場合の目安であり、高速モードでは約3時間半使用できません(EMSレベル2・室温25℃の場合)。充電時間や動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。
- \*充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。
- \*初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

# 1

付属の充電台、USBコード、ACアダプターを右図のように接続する。

※端子の形が一致するように差し込みます。

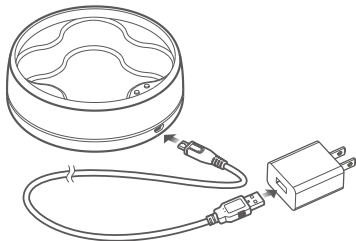

## 2

ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

※必ず付属のACアダプターを使用してください。

※パソコン等のUSBポートからも充電は可能ですが、一部のパソコン、モバイルバッテリーでは充電ができない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

## 3

本体と充電台の充電端子が触れるように本体を置く。

※充電前に、本体と充電端子の水滴をしっかりと拭き取ってください。充電端子に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。

※LEDが点滅し、充電を開始します。

### お願い

充電が開始されない場合は、アタッチメントをはずしてから再度お試しください。(本体と充電台の充電端子が正しく触れてないおそれがあります。)

# 4

充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜く。

※充電中は、青色LEDが順に点滅・点灯していきます。LED1～5がすべて点灯になったら充電完了です。

## 充電池について

●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)●電池は交換には対応していません。●長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

# はじめにお読みください

## 安全装置について

使用中に身体の一部などが挟まった状態が3秒間以上続くと、安全のため動作が停止します。続けて使用するには、再度電源をオンにしてください。

## アタッチメントについて

用途に合わせてアタッチメントを付け替えてご使用ください。アタッチメントは消耗品です。摩耗した場合は、新しいアタッチメント(別売)に交換してください。

### 頭皮・ボディ用 アタッチメント

頭皮や、二の腕・ウエスト・太もも・ふくらはぎなど全身に使用できます。



### ニードル形(頭皮専用) アタッチメント\*

強めの刺激が欲しいときに。頭皮に使用できます。



### フェイス用 アタッチメント


顔・首・デコルテに使用できます。



※ニードル形アタッチメントを顔や身体に使わないでください。つかむ力が強いいため挟み込む場合があります。

## アタッチメントに関する注意点

※EMS(電気刺激)を通電させるために、アタッチメントにカーボン(炭)を配合しています。そのため、お肌や物にこすりつけると黒く汚れる場合がありますのでご注意ください。衣類の上からの使用を避け、素肌にご使用ください。なお、お肌の角質や皮脂汚れにカーボンの色が付き、黒っぽい粉のように残る場合があります。その際は、水ですすいでください。

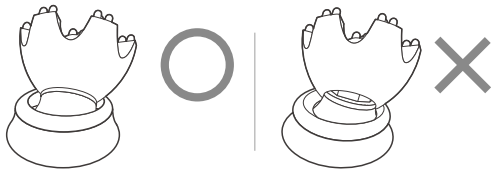

※アタッチメントは確実に奥まで差し込んで取り付けてください。正しく取り付けていないと、使用中にはずれる場合があります。

## EMSについて

電気ので筋肉を刺激することができます。EMSレベルは5段階から選択できます。  
使いはじめやお肌の弱い方、首すじに使用する場合は必ずEMSレベル1(LED1のみ点灯)からご使用ください。

### EMSに関する注意点

**[ EMSは、水などの水分を通じて伝わる仕組みになっています。 ]**

お肌が乾燥しているとEMS刺激を感じにくくなります。EMS刺激を十分に実感するには、ご使用部位を随時、水やお湯などで十分に湿らせるようにしてください。

頭皮はEMSを感じにくい部位ですが、地肌をしっかり湿らせてからシャンプーを泡立て、アタッチメントが地肌に触れるようにご使用いただくと比較的EMS刺激を感じやすくなります。EMS刺激の感じ方は個人差があります。

なお、乾いた髪やお肌にもご使用いただけますが、EMS刺激は感じにくくなります。



〔 4つのローラーに+極と-極が右図のように配置されています。 〕


+極と-極が同時に肌に触れることによって電気が流れる仕組みとなっています。4つのローラーが肌に触れるようにあてると、効果的に通電させることができます。

〔 本製品は、頭皮や顔、ボディに使用できますが、使用する部位によって電気刺激の感じ方が大きく異なります。 〕

使用部位を変えるごとに、必ずEMSレベル1(LED1のみ点灯)から調整するようにしてください。ご使用前に「安全のご注意」をよくお読みの上、無理のない範囲でご使用ください。

〔 本製品を使用後、刺激により一時的に肌が赤くなることがございます。 〕

時間がたつと薄くなるので問題はございませんが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。

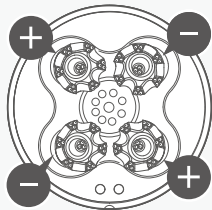

# お肌へのプレテスト

本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のために必ず相性をプレテストしましょう。

頭皮・ボディ用アタッチメントをご使用ください。



1

肌を清潔な状態にする。  
※腕の内側を石鹸で洗います。

2

腕の内側を水で十分に濡らし、電源ボタンをオンにして約1分間使用する。

※低速モード、EMSレベル1 (LED1のみ点灯)でおこなってください。

※少しずつ位置をずらしながら、軽く当てるようにしてください。

※実施中に発疹、かゆみ、痛みなどの異常が生じた場合は直ちにテストを中止してください。



### 3

24時間以内にお肌に異常(痛みやほてり)がないことを確認する。

※本製品を使用後、刺激により一時的に肌が赤くなることがございます。時間がたつと薄くなるので問題はありませんが、症状が回復しない場合は使用せずに専門医にご相談ください。

異常がみられる場合は使用しないでください。

# ご使用方法

使用推奨水温は5℃～42℃です。

1

アタッチメントを選んで、本体に取り付ける。

※本体の可動部とアタッチメントの差込穴の形が合うように垂直に差し込んでください。破損や故障の原因になりますので、可動部を左右にねじったり、無理に動かさないでください。

2

頭皮またはお肌を十分にぬらす。

◎頭皮：水やシャンプーなど

◎お肌：水やお湯、化粧水、ゲルなど

※乾いた髪やお肌でも、頭皮ケアやリラクゼーションとしてお使いいただけますが、EMS刺激は感じにくくなります。EMS刺激を十分に実感するには、ご使用部位を随時、水やお湯などで十分に湿らせるようにしてください。

※オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しないでください。

3

右図のように本体をしっかりと持つ。

※手についたシャンプーや化粧水などをよく洗い流してから持ってください。本体が滑って落ちると、けが・故障の原因になります。



4


電源ボタンを長押ししてオンにし、回転速度を選択する。

※電源ボタンを短く押すたびにモードが切り替わります。

低速モード⇒中速モード⇒高速モード

※使いはじめや慣れるまでは、必ず低速モードから使用してください。

※電源をオンにすると、本体底面の赤色LEDライトが点灯します。LED光を当てることで頭皮やお肌をケアします(フォト機能)。なお、赤色LEDライトを個別にオフに設定することはできません。

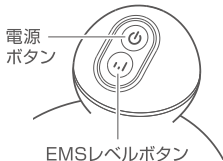

## 5

EMSレベルボタンを押して、EMSレベルを選択する。

※EMSレベルは5段階から選択が可能です。デフォルトはEMSレベル1です。

※使いはじめやお肌の弱い方、首すじに使用する場合は必ずEMSレベル1 (LED1が点灯)から使用してください。

※本製品は、頭皮や顔、ボディに使用できますが、使用する部位によって電気刺激の感じ方が大きく異なります。使用部位を変えるごとに、必ずEMSレベル1から調整するようにしてください。

## 6

以下を参考にケアをおこなう。

### 頭皮 ケア

頭皮・ボディ用、またはニードル形アタッチメントを使用し、下記の手順でケアします。

※頭皮はEMSを感じにくい部位ですが、地肌をしっかり湿らせてからシャンプーを泡立て、アタッチメントが地肌に触れるようにご使用いただくと比較的EMS刺激を感じやすくなります。EMS刺激の感じ方には個人差があります。



●おしあてる → 矢印の方向へすべらせる

### STEP1

前頭部と側頭部をケアする。

①生え際に約5秒間あてる。

②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。

※①、②を2回ずつ繰り返します。

※①のあてはじめに本体を小刻みに動かすと、アタッチメントが地肌により接触しやすくなります。

※軽くあてるようにし、絶対に強くあてないでください。



### STEP2

後頭部をケアする。

STEP1と同じ手順でと同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。



STEP3

頭頂部と後頭部をケアする。

図の位置を頭頂部からえりあしに向かって、順に約5秒ずつ押し当てて移動する。



●ブラシの正しいあて方



ブラシ全体が頭皮にあたっている



ブラシの一部が頭皮から浮いている




フェイス  
ケア

必ずフェイス用アタッチメントを使用し、ゆっくりと矢印に沿って動かし、顔・首・デコルテをケアします。

使用できない部位

鼻、耳、くちびる、まぶた、  
目のまわり、のどぼとけ  
(右記の●部位)

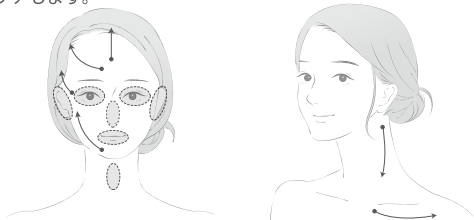

※お肌が乾燥しているとEMS刺激を感じにくくなります。EMS刺激を十分に実感するには、ご使用部位を随時、水やお湯などで十分に湿らせるようにしてください。

※顔に使用する際は、必ずメイクを落としてください。

※顔に使用する際は、必ず低速モードで使用し、強く押し当てすぎないようにしてください。

※首すじに使用する場合は、EMS刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

## ボディ ケア

頭皮・ボディ用アタッチメントを使用し、二の腕、ウエスト、太もも、ふくらはぎなどにもご使用いただけます。

- ※ニードル形アタッチメントを身体に使わないでください。つかむ力が強いので挟み込む場合があります。
- ※ご使用前に「安全のご注意」をよくお読みの上、指定の部位以外に使用しないように注意してください。  
なお、水中では本体の動作が停止し、使用することができませんのでご注意ください。

## 7

ケアが終わったら、電源ボタンを長押しして電源をオフにする。

※ボタンを長押ししなくても、動作開始から約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。

※電源をオフにすると、可動部が指定の位置に戻るまで数秒間動作を続けますが、異常ではありません。

※使用後、本体を清潔に保つために毎回お掃除をしてください。  
詳しくは、「お掃除のしかた」を参照ください。

## 8

頭皮に使用した場合は、シャンプーを洗い流し通常のお手入れ(トリートメントなど)をする。

※アタッチメントにカーボン(炭)を配合しているため、お肌の角質や皮脂汚れにカーボンの色が付き、黒っぽい粉のように残る場合があります。その際は、水ですすいでください。



Li-ion

本製品(本体)はリチウムイオン電池を内蔵しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

---

リチウムイオン電池内蔵製品の注意点は以下でご確認いただけます。


<https://mytrex.jp/support/safety/battery/>

# お掃除のしかた

1 | 電源がオフになっていることを確認する。

2 | 本体についている髪の毛や汚れを  
水で洗い流す。



3 | 本体からアタッチメントを取り外す。  
(図1参照)  
※アタッチメントが破れないように  
やさしく取り外してください。

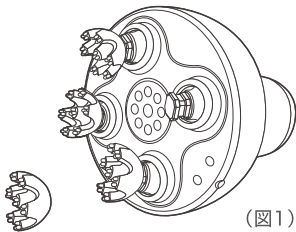

(図1)

## 4

付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを落とした後、水で洗い流す。  
※図2、3のように本体の可動部、アタッチメントなどを掃除してください。  
※汚れが取れにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

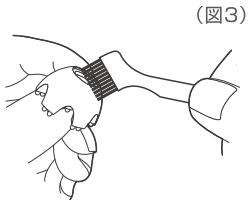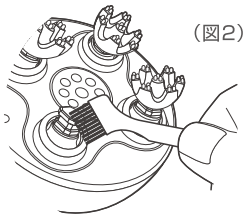

## 5

タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメントの水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。

※ご使用後に、本体底面の可動部およびカバー内に水が残る場合がありますが、本体内部は防水仕様(IPX7)になっており、浸水しているわけではありません。気になる場合は、本体を振って水を排出させるようにしてください。

※アタッチメントにカーボン(炭)を配合しているため、ご使用後に少量のカーボンが水に溶け出して本体やアタッチメントが黒っぽくなる場合があります。汚れの気にならない布を使用するようにしてください。

※特に本体の充電端子には水分が残らないように、しっかりと拭き取ってください。

※湿ったままの状態では充電台にのせたり、放置しないでください。においや変色・故障の原因になります。

## 6

本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける。

※アタッチメントが破れないようにやさしく取り付けてください。

# よくあるご質問

電源が  
入りません

⇒電源ボタンを押すと「ピ」となって動作が開始しないとき、また電源ボタンを押しても反応がないときは、本体の電池残量が不足しています。  
『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって本体を充電してください。  
⇒電源を入れるには、電源ボタンを長押し(約3秒)してください。

充電が開始  
されません

⇒ACアダプターをコンセントに差し込みましたか？  
『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって接続し本体を充電してください。  
必ず付属の充電用ACアダプターおよびUSBコードを使用してください。  
⇒本体と充電台の充電端子が正しく触れていますか？  
充電が開始されない場合は、アタッチメントをはずしてから再度お試しください。  
⇒本体の充電端子がぬれていませんか？  
充電端子の水分を拭き取り、乾燥させてから充電台に置いてください。また、本体および充電台の充電端子は定期的に清掃してください。

途中で  
停止します

- ⇒使用中に身体の一部などが挟まった状態が3秒間以上続くと、安全のために停止します。
- ⇒本体の電池残量が不足しています。  
『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって本体を充電してください。
- ⇒動作開始から約15分が経過すると、自動的に停止します。
- ⇒水中では動作が停止します。

EMS刺激が  
弱い、感じら  
れない

- ⇒EMSレベルボタンでレベルを上げてください。
- ⇒アタッチメントがお肌にうまくあたっていません。4つのアタッチメントがあたるようにしてください。
- ⇒お肌が乾燥していませんか？水や化粧水などでお肌を十分に湿らせてください。



EMS刺激が  
強い、痛い

⇒EMSレベルボタンでレベルを下げてください。  
⇒お肌が乾燥していませんか？水や化粧水などでお肌を十分に湿らせてください。  
※個人差や使用部位により、刺激が強く感じられる場合があります。無理のない範囲でレベルを調整してご使用ください。肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し専門医にご相談ください。

使用後に  
内部に  
水が残る

⇒本体底面の可動部およびカバー内に水が残る場合がありますが、本体内部は防水仕様(IPX7)であり、浸水しているわけではありません。  
気になる場合は、本体を振って水を排出させるようにしてください。

頭皮以外  
にも使用  
できますか？

⇒お顔やボディにもご使用可能です。  
お顔に使用する場合は、フェイス用アタッチメントを使用し低速モードでケアしてください。

# 保管のしかた

- 使用後は、必ず本体およびアタッチメントの水分を拭き取り、完全に乾燥させてから充電台に置いてください。充電台は防水仕様ではありません。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。
- アタッチメントにカーボン(炭)を配合しているため、ご使用後に少量のカーボンが水に溶け出して本体やアタッチメントが黒っぽくなる場合があります。保管場所にご注意ください。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターやUSBコードをコンセント等から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

# 製品仕様

定格電源	5V $\overline{\text{---}}$ 、1.0A	
消費電力	約5W(充電時)	
バッテリー	1800mAh、3.7V $\overline{\text{---}}$	
本体外形寸法	129mm×98mm×98mm(アタッチメント含む、充電台含まず)	
使用環境	温度5℃~40℃、相対湿度 $\leq$ 85RH%	
主な材質	本体：ABS樹脂、シリコン	
	アタッチメント：シリコン、カーボン	
	充電台：ABS樹脂	
セット内容	本体	本体：1台
	付属品	アタッチメント：12個(3種類×4個)
		充電台：1台
		USBコード：1本
		取扱説明書：1部
		掃除用ブラシ：2個
		ACアダプター：1個

---

## MYTREX カスタマーサポート

---

営業時間9:00~17:30

(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

[ 電話での  
お問い合わせ ]

092-260-7366

[ WEBでの  
お問い合わせ ]

<https://mytrex.jp/support/>



発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

Designed in Japan. Made in China.

©2023 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202300KE