


コラーゲンフィルター
CF記載




- ・フィルターをコラーゲンフェイシャルフィルターへ変更してください
- ・施術のモードをご自身に合わせて設定してください。
- ・初めてのご使用はレベル1でご使用下さい。
- ・付属のサングラスをかけてご使用ください。
- ・眉毛や髪の毛に当たらないようにご使用下さい。
- ・瞼、唇へのご使用はおやめ下さい
- ・施術前、施術中はジェル等の使用はお控えください。
- ・使用後は肌を温めたり刺激を与えるようなことはお控えください。
- ・シミやほくろ等は避けてご使用ください。
- ・施術部位のメイクは落としてご使用ください。
- ・同じ個所へ連続しての照射はご遠慮ください。
- ・機械を動かす方向に肌を引き上げながら施術をするとより効果的です。
- ・機械の動かす方向はよくご確認ください。
- ・体調のすぐれないときは使用をお控えください。

I

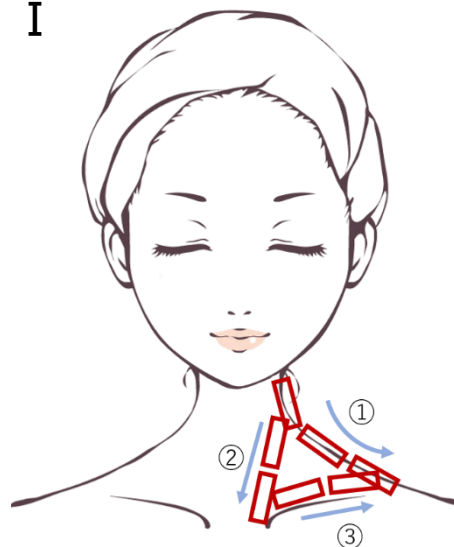

- ① 耳下腺 → 首筋に沿って肩へ流します
- ② 耳下腺 → 鎖骨の内側へ流します
- ③ 鎖骨の内側 → 外へ向かって流します

II

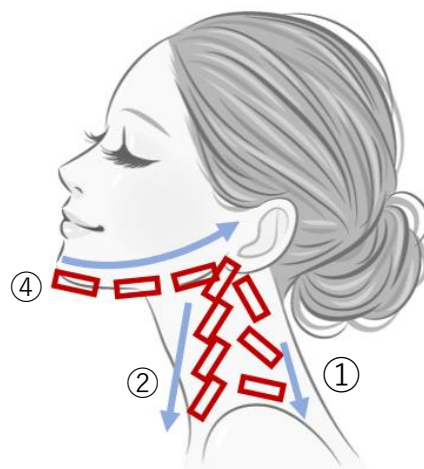


- ④ フェイスラインの下（顎の裏側）を
オトガイ → 耳下腺に向かって流します

III



- ⑤ フェイスラインから皮膚を持ち上げる
ようにして照射します
- ⑥ ほうれい線 → 頬骨の下へ流します
- ⑦ 鼻の横 → こめかみに向かって流します

IV

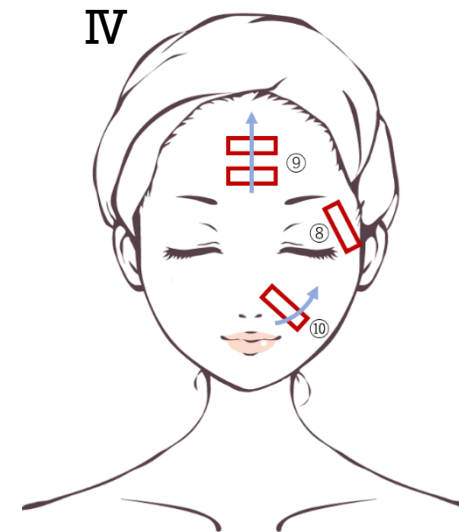

- ⑧ 目尻
- ⑨ おでこ
- ⑩ 口元のたるみ